


NIR850/940型 ご利用ガイド

850型と940型を併用して認知症予防と痩身美容

- ライトを直視しないでください。近赤外線は目には見えません。赤い光は点灯確認と肌の活性化を兼ねたランプです。
- NIR850型・NIR940型は頭部/痩身希望部位から **10cm** 離して使います。

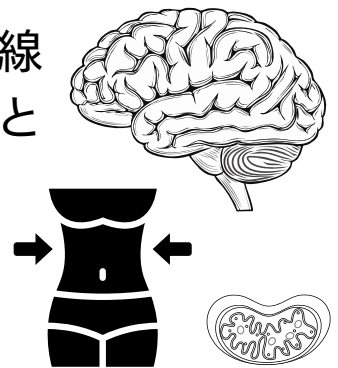

• 同一部位への連続使用は15分以内を厳守のこと。

- NIR850型を耳の後ろから当てると、脳内の血流が良くなり酸素と栄養素が運ばれます。同時にNIR940型を頭頂部及び額から照射すると、光が頭蓋骨を透過して前頭葉にまで達し、脳内のミトコンドリアが活性化し、脳を元気にします。
- 同様のメカニズムで、照射部位の脂肪の分解と肌の新陳代謝を促進します。



ご利用時の注意事項

- 近赤外線は取扱い方法を厳守してください。
- 同一部位の1日における使用回数は2回までとし、1時間は間隔を空けてください。
- 3日間連続して使用した場合、翌1日は使用しないでください。
- 医療機器ではないことを理解してご利用ください。

